

Schritt 3----- Gerät einschalten (Betriebsmethoden)

Tipps: Verwenden Sie das Gerät beginnend von einer niedrigen zur hohen Stufe.

- Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie sicher, dass der gesamte Gerätekopf Ihre Haut gut berührt und bewegen Sie das vorsichtig. (Anmerkung: Bei Verwendung des RF-Modus kann der Gerätekopf nicht länger als 5 Sekunden in derselben Position bleiben.) RF, EMS, CV-Modus: Alle 5 Minuten gibt es eine automatische Erinnerung, nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät selbständig aus.
- Reinigen Sie Ihr Gesicht: Entfernen Sie nach der Massage die übrige Creme. Bitte benutzen Sie ein Handtuch oder Wasser, um Ihr Gesicht zu reinigen.

Gerät reinigen: Sie können das Gerät direkt unter fließendem Wasser waschen und mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch trocknen.
- Verwenden Sie zum Massieren das La Beauté Secrète Tragbare Gerät.

RF(Radiofrequenz) Modus : Verwenden Sie das Gerät beginnend von einer niedrigen zur hohen Stufe.

Verwendung zusammen mit folgenden Produkten: Essenz / Emulsion / Gel

- Bewegen Sie das Gerät von der Mitte der Stirn zur linken und rechten Seite.
- Bewegen Sie das Gerät von der unteren Augeninnenseite nach außen
- Bewegen Sie das Gerät kreisförmig von der Mitte Ihres Gesichts nach außen.
- Bewegen Sie das Gerät von unten nach oben auf Ihrem Gesicht.



- Bewegen Sie das Gerät von der unteren Augeninnenseite nach außen



- Bewegen Sie das Gerät von unten nach oben auf Ihrem Gesicht.



EMS (Mikrostrom) Modus: Verwenden Sie das Gerät beginnend von einer niedrigen zur hohen Stufe.

Verwendung zusammen mit folgenden Produkten: Gel / Emulsion / Gesichtscreme Leichte Textur / Maske

- Bewegen Sie das Gerät von beiden Seiten des Mundes von unten nach oben.
- Bewegen Sie das Gerät kontinuierlich mit leichtem Druck.



CV (Ultraschall) Modus

Verwendung zusammen mit folgenden Produkten: Emulsion / Creme (Reinigungsmodus mit Make-up-Entferner)

- Bewegen Sie das Gerät kreisförmig von der Mitte des Gesichts nach außen
- Bewegen Sie das Gerät mit leichtem Druck von beiden Seiten der Nase zum Mittelteil.



AUTO (Kombination) Modus

RF+CV+ Nano-Rotlicht 7,5 Minuten danach EMS+ Nano-Blaulicht 7,5 Minuten

- Bewegen Sie das Gerät von der Mitte Ihres Halses nach außen. Bewegen Sie das Gerät von oben nach unten, um die Durchblutung der Nackenmassage zu fördern.
- Bewegen Sie das Gerät kontinuierlich von der Mitte nach außen oder von außen zur Mitte.



- Bewegen Sie das Gerät mit leichtem Druck gemäß den obigen Schritten.

Automatisches Ausschalten

Das Gerät schaltet nach 15 Minuten selbständig aus.

Bitte drücken Sie lange die EIN/AUS - Taste, wenn Sie fortfahren möchten.

Ein Piepton ertönt, um anzuzeigen, dass es länger als 5 Minuten mit einem Modus verwendet wurde.

Wasserdicht

- Das Gerät ist gemäß IPX6 wasserdicht und kann mit Wasser gereinigt werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Ladestation ist nicht wasserdicht.
- Es ist normal, wenn es während des Ladevorgangs heiß ist.

Produktparameter

Produktname: La Beauté Secrète Tragbares Gerät

Nennspannung: 7.4V

Nennstrom: 1000mA

Nennleistung: 7.4W

Ladespannung: 9.0V

Ladestrom: 1.0A

Ladeverfahren: Drahtloses Laden

Ladezeit: <6 Stunden

Empfohlene Anwendungszeit: 15 Minuten (Das Gerät schaltet nach 15 Minuten selbständig aus.)

*Ein Piepton ertönt, um anzuzeigen, dass es länger als 5 Minuten mit einem Modus verwendet wurde.

Verwendungszeit: <60 Minuten (für eine Funktion)

Funktion: RF-----1MHZ (5 Stufen)

EMS-----5 Stufen

CV-----5MHz

LED-----Rot/Blau

Andere Funktion LCD Anzeige

TQ-D27 La Beauté Secrète Tragbares Gerät

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Forschungs- und Entwicklungsunternehmen:

Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.

Adresse: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, 301700 Tianjin, China

www.tiens.com

Hersteller:

Asia Pacific Perfect Technology Co.,Ltd

Adresse: Floor 1 west, No. 13, Daxing Road 1st, Buyong Industrial area, Shajing Road,

Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Vielen Dank, dass Sie La Beauté Secrète Tragbares Gerät verwenden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Produktname

La Beauté Secrète Tragbares Gerät TQ-D27

Produktbeschreibung

Modus	Funktion & Effekt
RF	RF + LED Nano-Rotlicht
EMS	EMS + LED Nano-Blaulicht
CV	CV Ultraschall
RF	AUTO Kombinationsmodus Zuerst RF + CV + Nano-Rotlicht 7,5 Minuten Dann EMS + Nano-Blaulicht 7,5 Minuten

Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Gerät beginnend von einer niedrigen zur hohen Stufe.
- Nicht im Falle einer Fehlfunktion verwenden, da dies zu Schädigungen führen kann. Bitte hören Sie sofort mit der Anwendung auf.
- Nicht anwenden, wenn Ihre Haut Hautausschläge, Entzündungen, Juckreiz oder andere Anomalien aufweist.
- Personen, die eine zahnärztliche Behandlung erhalten, sollten die Anwendung unterbrechen.
- Nicht verwenden, wenn sichtbare Schäden vorliegen.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Verdünner, Benzin und Nagellack ab. Andernfalls kann die Oberfläche des Geräts beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange an der gleichen Hautstelle.
- Achten Sie bei der Verwendung auf den Hautzustand.
- Nicht geeignet für: Menschen mit allergischer Kontaktdermatitis oder Hautkrankheiten, schwangere Frauen, während der Menstruation, Menschen mit Lähmungen oder sensorischen Beeinträchtigungen sowie Patienten mit Knochenkrankungen im Gesicht.
- Halten Sie das Gerät und die Ladestation ständig trocken.
- Das Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Energiemangel sowie Kinder geeignet. Es sei denn, die Anwendung wird von einer geeigneten Person angeleitet und zur Gewährleistung der sicheren Anwendung überwacht.
- Verwenden Sie das kabellose Laden nicht in feuchter Umgebung wie z.B. Duschräumen oder Schwimmbädern.
- Dieses Produkt muss zusammen mit Lotion oder Creme verwendet werden.
- Kinder unter 14 Jahren sollten es nicht verwenden.

Gefahr

*** Bitte nicht unter folgenden Bedingungen verwenden, da dies ansonsten zu Schäden führen kann.


- Künstliche Lungen
- Herzschrittmacher
- Elektrokardiographen und andere tragbare Geräte
- Metall im Körper
- andere Geräte, die in den Körper implantiert sind

*** Verwenden Sie das Gerät nicht für folgende Körperbereiche, um Umfälle oder Verletzungen zu vermeiden:

- Über einer Zahnspange
- Bereiche, in denen Schönheitsoperationen durchgeführt wurden
- Augenlider, Augäpfel oder Augenpartien
- Schnittwunden
- Bei Infektions- oder anderen Krankheiten ist vor Gebrauch ein Arzt zu konsultieren

Produktübersicht

- RF Gerätekopf/ EMS Gerätekopf
- CV Ultraschall Kopf
- LED Nano Rot- / Blaulicht
- LED Anzeige
- Bestätigung der Funktion / Einstellung der Stufe
- Ein- / Ausschalten bzw. Umschalten
- Drahtlose Ladestation

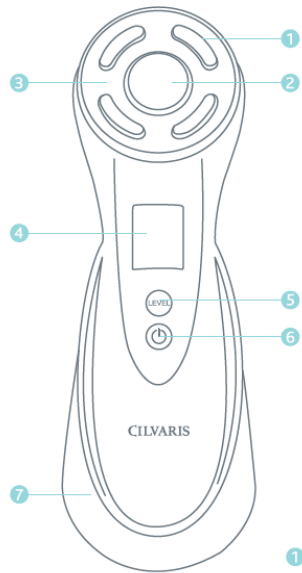

Funktionen

Anzeige	Stufe (Bitte passen Sie die Stufe nach eigenem Empfinden an.)					
RF	RF AUS	RF Stufe 1	RF Stufe 2	RF Stufe 3	RF Stufe 4	RF Stufe 5
EMS	EMS AUS	EMS Stufe 1	EMS Stufe 2	EMS Stufe 3	EMS Stufe 4	EMS Stufe 5
CV	CV AUS	CV EIN				
AUTO	AUTO AUS	AUTO EIN				

	1. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden zum Einschalten bzw. Ausschalten.
	2. Wenn „RF“ blinkt, drücken Sie zum Umschalten auf EMS, CV, AUTO.
	3. Wenn „RF“ blinkt, drücken Sie einmal, um diese Funktion zu bestätigen.
	4. Drücken Sie nach Bestätigung der Funktion einmal, um Stufe 1 auszuwählen, zweimal, um Stufe 2 auszuwählen, dreimal, um Stufe 3 auszuwählen, viermal, um Stufe 4 auszuwählen und fünfmal, um Stufe 5 auszuwählen.

Anwendungsschritte

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gerät über ausreichende Akkuleistung verfügt.

Aufladen

1. Stellen Sie das Gerät auf die Ladestation, schließen Sie die Stromversorgung an und beginnen Sie mit dem Laden. Das vollständige Aufladen dauert ca. 6 Stunden.
2. Bei der Erstinbetriebnahme wird empfohlen, das Gerät 6 Stunden lang aufzuladen. Im Gerät befindet sich eine intelligente Sicherheitssteuerung. Wenn es aufgeladen wird, kann es aus Sicherheitsgründen nicht eingeschaltet werden.

Schritt 1 ----- Reinigen

Entfernen Sie das Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Sie können auch den CV - Modus für die Gesichtereinigung verwenden. Befestigen Sie das Wattepad wie folgt und verwenden Sie einen Make-up-Entferner.



- Befestigungsring für das Wattepad
- Wattepad
- Gerätekopf
- Befestigt

Verwendungsmethode für CV Ultraschallreinigungsmodus

1. Befestigen Sie das Wattepad mit dem Befestigungsring auf den Gerätekopf.
2. Befeuchten Sie das Wattepad mit Make-up-Entferner und stellen Sie sicher, dass das gesamte Pad vollständig nass ist.
3. Schalten Sie das Gerät ein --- wählen Sie CV Modus.
4. Halten Sie das Gerät fest und stellen Sie sicher, dass der gesamte Gerätekopf die Haut gut berührt. Bewegen Sie das Gerät auf Ihrem Gesicht gemäß den folgenden Fotos 1-6 (linke und rechte Gesichtshälfte sind gleich). Während der Massage wird das Pad trocken und der Gerätekopf wird schwerer zu bewegen. Bitte füllen Sie Make-up-Entferner nach, um das Pad nass zu halten.
5. Entfernen Sie nach der Reinigung den Ring und das Wattepad. Reinigen Sie den Gerätekopf mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch und fangen Sie mit den nächsten Schritten an.

Verwendungsmethode für CV Ultraschallreinigungsmodus

1. Befestigen Sie das Wattepad mit dem Befestigungsring auf den Gerätekopf.
2. Befeuchten Sie das Wattepad mit Make-up-Entferner und stellen Sie sicher, dass das gesamte Pad vollständig nass ist.
3. Schalten Sie das Gerät ein --- wählen Sie CV Modus.
4. Halten Sie das Gerät fest und stellen Sie sicher, dass der gesamte Gerätekopf die Haut gut berührt. Bewegen Sie das Gerät auf Ihrem Gesicht gemäß den folgenden Fotos 1-6 (linke und rechte Gesichtshälfte sind gleich). Während der Massage wird das Pad trocken und der Gerätekopf wird schwerer zu bewegen. Bitte füllen Sie Make-up-Entferner nach, um das Pad nass zu halten.
5. Entfernen Sie nach der Reinigung den Ring und das Wattepad. Reinigen Sie den Gerätekopf mit einem sauberen Tuch oder Taschentuch und fangen Sie mit den nächsten Schritten an.



Schritt 2 ----- Tragen Sie Creme bzw. Lotion auf.

Je nach ausgewähltem Modus und persönlichem Hauttyp wählen Sie ein geeignetes Produkt aus.

Nr.	Modus	Funktion	Verwendung zusammen mit folgenden Produkten
1	EMS AUS	RF +LED Nano-Rotlicht	Essenz / Emulsion / Gel
2	EMS	EMS +LED Nano-Blaulicht	Gel / Emulsion / Gesichtscrème Leichte Textur / Maske
3	CV	CV Ultraschall	Emulsion / Creme (Reinigungsmodus mit Make-up-Entferner)
4	AUTO	RF + CV+ Nano-Rotlicht 7,5 Minuten EMS + Nano-Blaulicht 7,5 Minuten	Leichte Textur Produkte, Maske usw.

Hinweis: Dies stellt aufgrund unterschiedlicher Hautzustände nur eine Empfehlung und keine zwingende Vorgabe dar.