

TIENS kraujo apytaką gerinantis masažuoklis TQ-D30



MASAŽO MEISTRAS

TIENS kraujo apytaką gerinančio masažuoklio funkcijos:

- 1. Akupunktūra**
- 2. Pagrindinių kūno taškų stimuliavimas**
- 3. Delnų ir pėdų refleksinių zonų masažas.**

Naudojant šį prietaisą įvairiais būdais, pavyzdžiui, stovint, sėdint, klūpint, pasilenkus, gulint ant pilvo ar nugaros, jums bus atliktas nugaros smegenų, raumenų, kanalų ir refleksinių taškų masažas. Tai padės išlaikyti in ir jan pusiausvyrą ir atpalaiduoti raumenis.


Pėdos geriausiai atspindi žmogaus organizmo būklę

- Pėda yra nervų taškų židiny, joje yra 6 iš 12 in ir jan taškų: 3 jan ir 3 in.
- Pasak tradicinės kinų medicinos, kiekvienas organas turi atitinkamus taškus pėdose.
- Spaudžiant in ir jan taškus pėdose ir atkreipiant dėmesį į skausmo reakciją, galima nustatyti mūsų organizmo pažeidimus.

Masažuoklis skatina kraujotaką ir medžiagų apykaitą. Taip pat padeda atkurti tinkamas kūno organų funkcijas.

Pėdos yra „antroji kūno širdis“


Foot Reflexology Chart

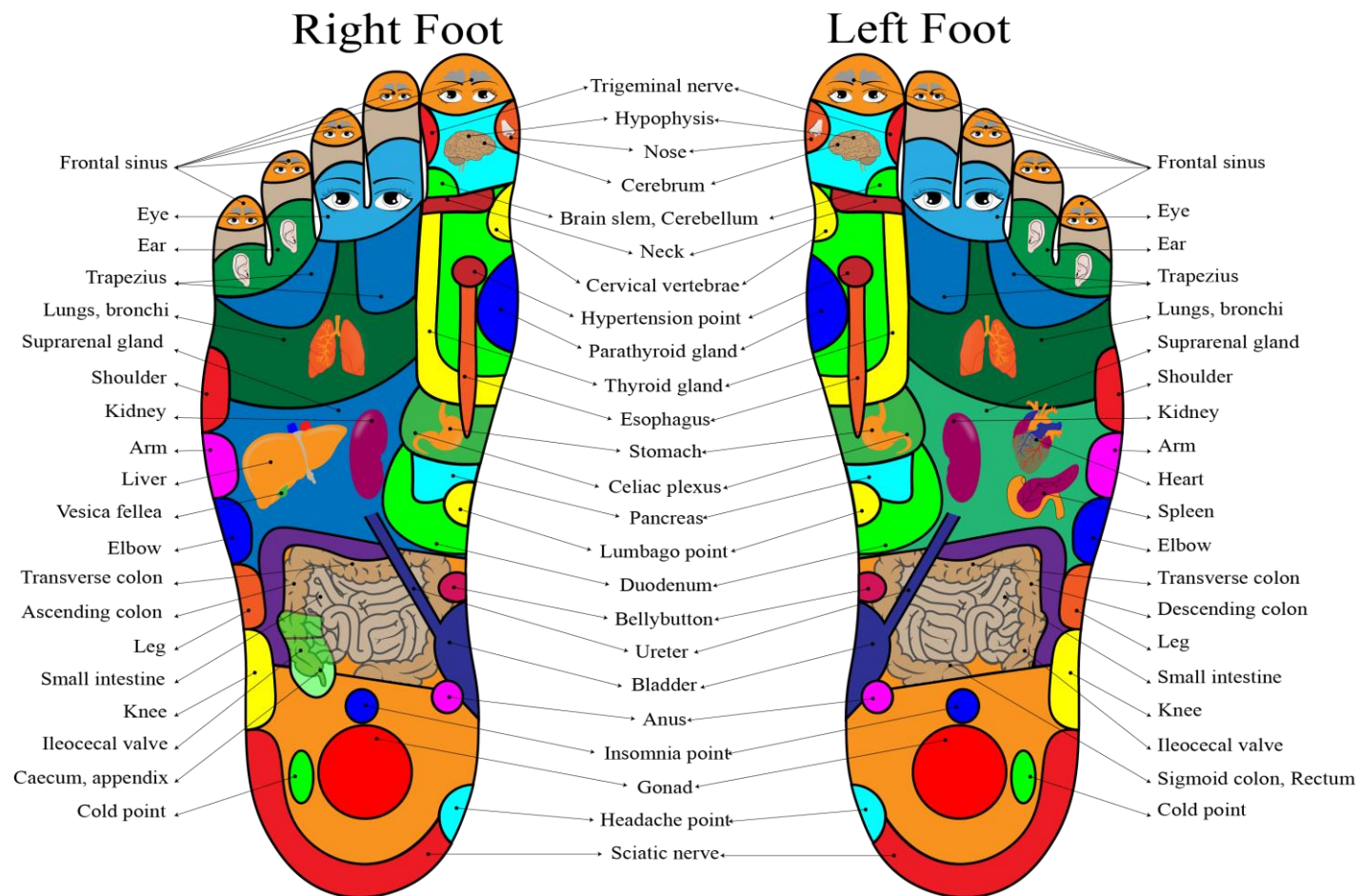


Kaip veikia TIENS kraujo apytaką gerinantis masažuoklis

Kraujo apytaką gerinantis masažuoklis (BCM) naudodamas sūkurio jėgą veikia pagal laikrodžio rodyklę.

Jis masažuoja ir aktyvina refleksines zonas ir akupunktūros taškus pėdose ir delnuose bei stimuliuoja atitinkamus kūno organus. Tai padeda padidinti kraujo aprūpinimą deguonimi, atjauninti organizmo ląsteles ir pagerinti či energijos bei kraujo apytaką.

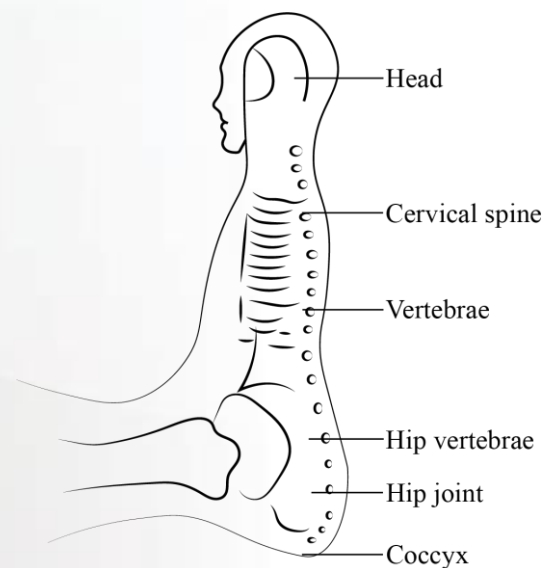

Medialinė pėda atitinka galvą ir stuburą

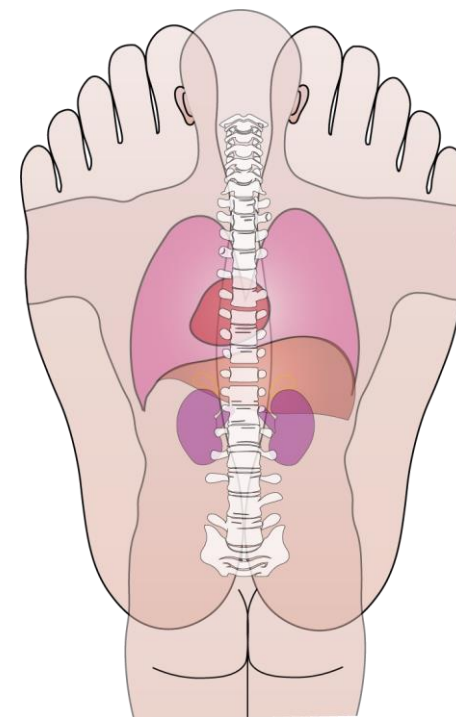

Unikali technologija ir jos privalumai


Sūkurio jėga

Greitai suaktyvina kraujotaką

Skatina tinkamą medžiagų apykaitą

Padedą pašalinti toksinus

Padedą sumažinti riebalinį audinį.

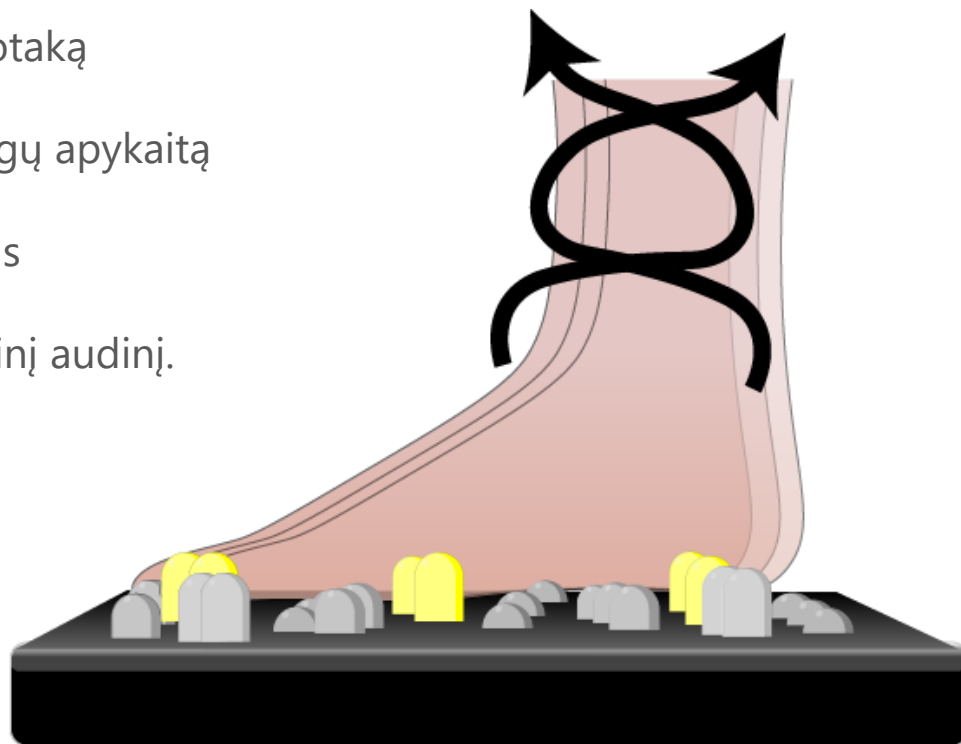

Kojų masažas


Sureguliuoja meridianų kanalus

Pagerina mikrocirkuliaciją.

Naudojimo instrukcija

- 1 Atsisėskite ant kėdės ir padėkite pusę basų pėdų ant masažuoklio, įjunkite prietaisą.
- 2 Po 5 minučių ant masažuoklio padėkite visas pėdas.
- 3 Patogiai atsisėskite ir natūraliai ištieskite kojas, sėdėdami remkitės tiesiai prie kėdės atlošo ar sienos.
- 4 Masažuokliu galite naudotis ir stovėdami. Pradžioje siekiant stabilumo, masažuoklį patariama pastatyti kambario kampe ir atremti į sieną.
- 5 Prieš naudodami gulimoje padėtyje, uždėkite rankšluostį ant vibracinės plokštės, pasirinkite automatinio valdymo režimą ir įjunkite prietaisą.
- 6 Prieš naudodami masažuoklį išgerkite puodelį šilto vandens. Kiekvienas ciklas neturi viršyti 15 minučių.
- 7 Naudodami masažuoklį atpalaiduokite raumenis ir patogiai sėdėkite, stovėkite ar gulėkite. Baigę masažo ciklą, nedarykite staigių judesių 30 sekundžių, tada atsistokite.

Masažas padeda

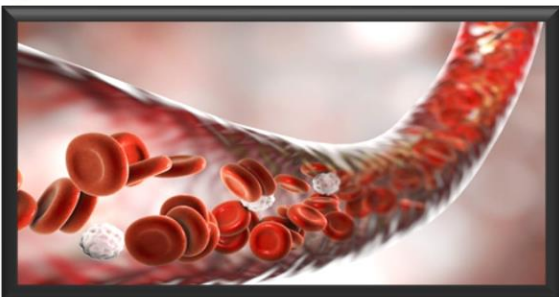

Pagerinti kraujo apytaką



Suaktyvinti organizmo ląsteles ir stimuliuoti imunitetą




Kontroliuoti kūno svorį ir formą




Pagerinti medžiagų apykaitą ir medžiagų pasisavinimą, palengvinti virškinimą.

Masažas padeda

Reguliuoti mikrocirkuliaciją

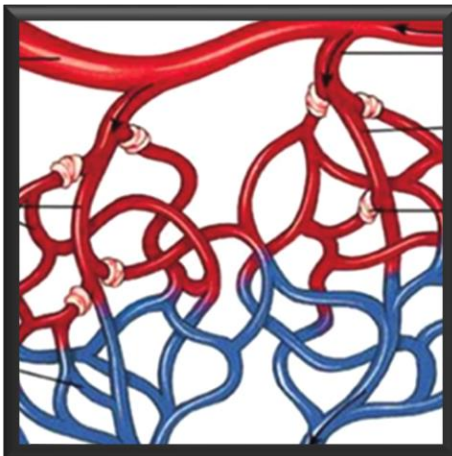


Masažuoti simpatinį nervą
ir subalansuoti
endokrinines funkcijas

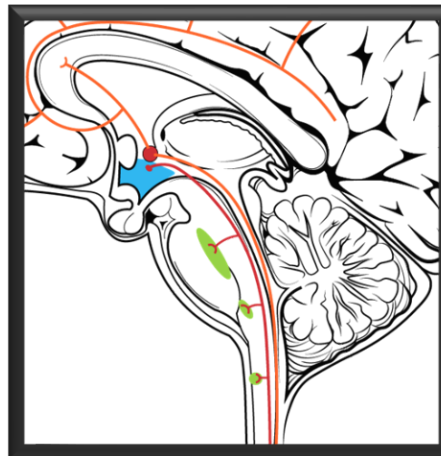

Gilinti kanalus ir skatinti či
energijos bei kraujo
cirkuliaciją



Pagerinti odos būklę

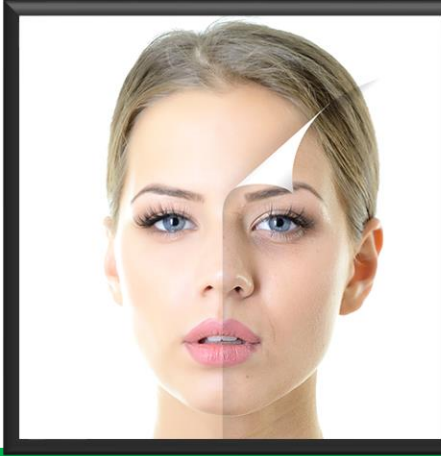

Kojų vibracija



Pėdų vibracija



Klubų vibracija



Galūnių vibracija



蹲姿

Pritūpimai



拉筋姿


Tempimas




曲膝姿

Įtupsto padėtis




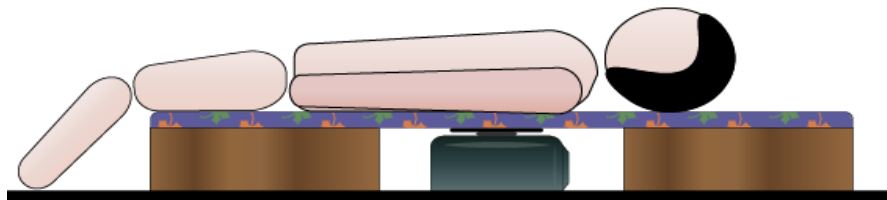

Kaklo ir pečių srities skausmas

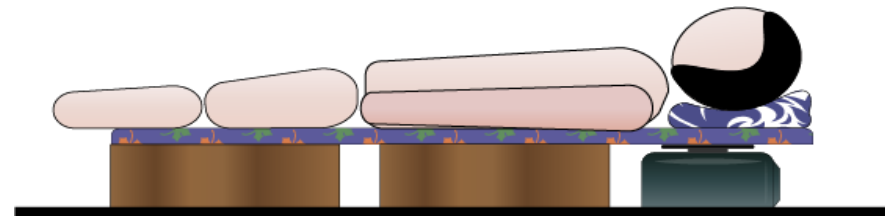

Galvos skausmas

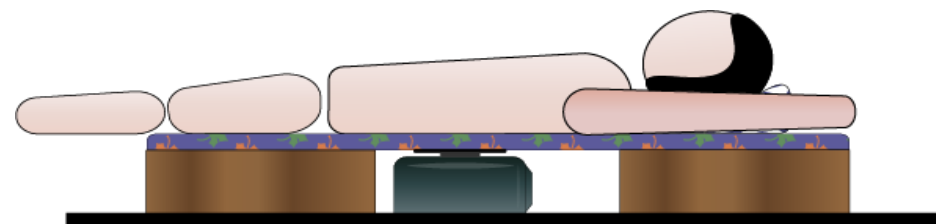

Nugaros skausmas

tiens

Efektyvesnis

**Dvejopas
režimas**

**2 greičiai
(lėtas ir greitas)**



Patobulintas
modelis




Kaip naudoti rankinį valdiklį ir įjungimo-išjungimo jungiklį

Prietaisą galima valdyti pasirinkus vieną iš dviejų darbo režimų

1. **Įjungimo-išjungimo jungiklis:** yra prie maitinimo linijos įvado galinėje prietaiso pusėje. Tai vieno greičio nepertraukiamas režimas.

2. **Rankinis valdiklis:** Rankiniame valdiklyje yra LAIKO nustatymas, 2 GREIČIO nustatymai ir (O) IŠJUNGIMO režimas.

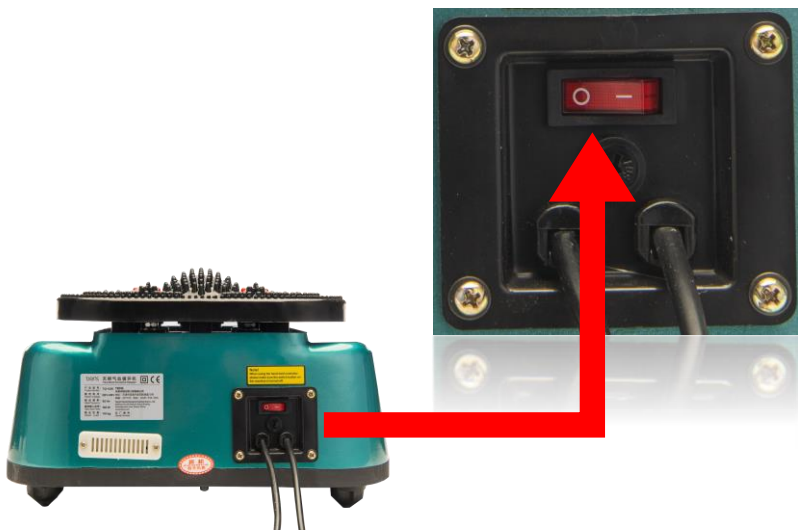

tiens

tiens 天狮气血循环机

Tiens Blood Circulative Massager



产品型号: TQ-D30 TIENS

Product Number: 天津天狮生物工程有限公司

额定电压: 220V~240V 地址: 天津市武清开发区新源道20号

Rated Voltage: 邮编: 301700 电话: 4006-518-666

额定频率: 50 Hz

Rated Frequency: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.

额定输入功率: 160 W

Rated Input Power: Address: No.20 Xinyuan Road, Wuqing

额定负载: 110 kg

Rated Load: 出厂编号: Serial Number:

Serial Number:

SVARBU:

Naudojant rankinį valdiklį, prietaiso jungiklio mygtukas turi būti išjungtas.

Note!

When using the hand-held controller please make sure the switch button on the apparatus is turned off.



On/Off



tiens



TIENS