

CILVARIS

Išmanus grožis



ÇILVARIS

歆悦·时



1 dalis

Dažniausios odos priežiūros
klaidos

1 dalis

Dažniausios odos priežiūros klaidos



Pakaitinis plovimas karštu ir šaltu vandeniu gali sumažinti poras?



Kuo storesnis kremo sluoksnis, tuo geresnis drėkinamasis poveikis?



**Oda išskiria daugiau riebalų, nes jai trūksta drėgmės?
Sausa viduje, bet riebu išorėje?**



Reikia stipriai įtrinti priemonę, kad maistinės medžiagos geriau įsigertų į odą?


2 dalis

Savo odos pažinimas




Oda sudaryta iš 3-jų sluoksnių (epidermio, dermos, poodinio audinio)

Odos storis (be poodinio audinio): 0,05 – 4 mm

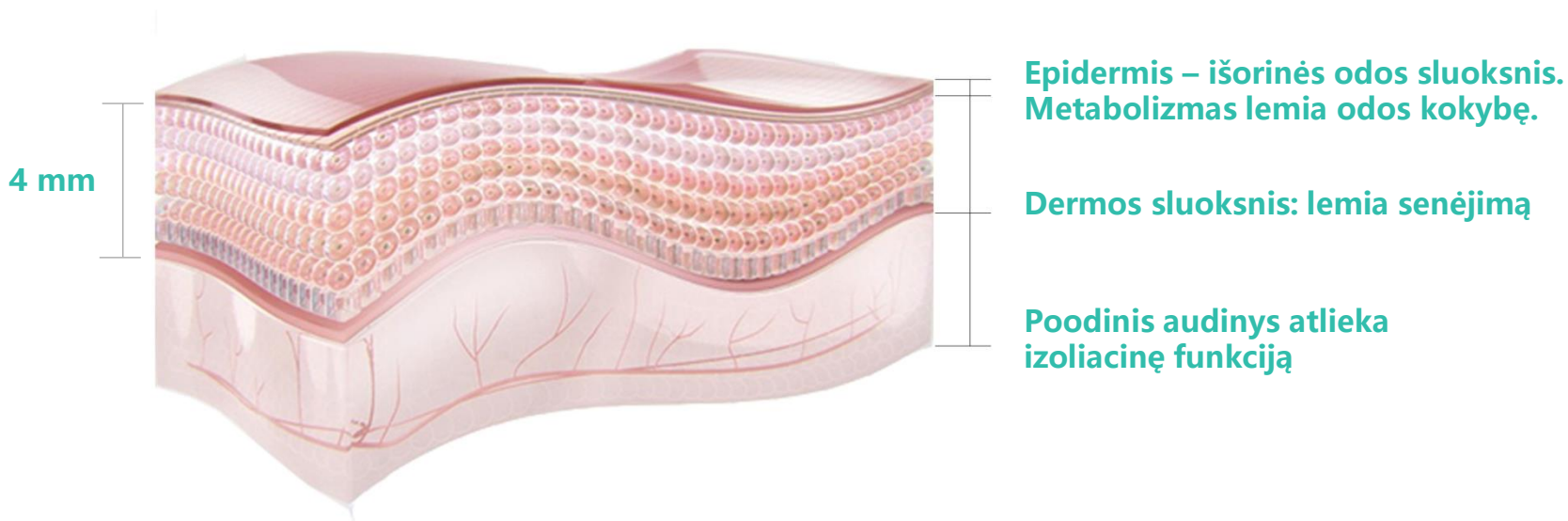

Epidermis – odos barjeras

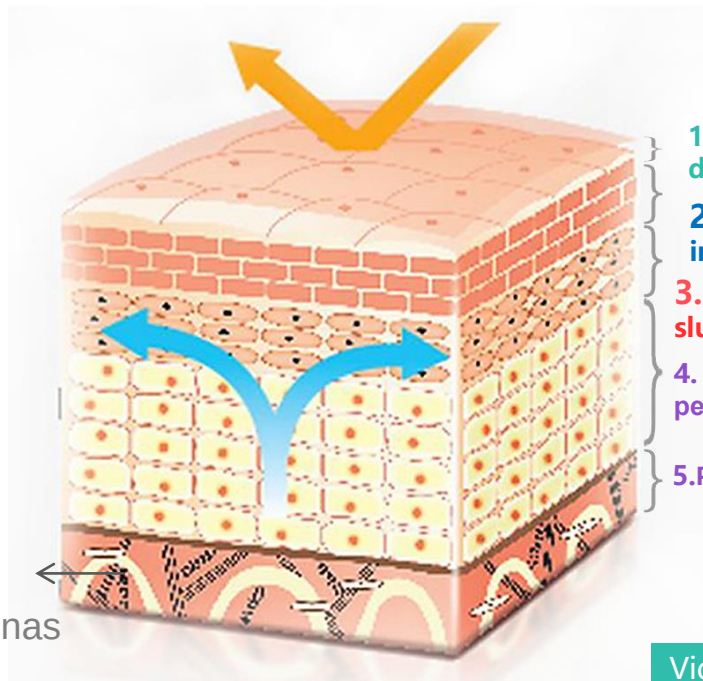

1. Raginis sluoksnis – pagrindinis odos saugotojas, sudarytas iš daugiau nei dešimties negyvų ląstelių sluoksnių
2. Skaidrusis sluoksnis neleidžia prasiskverbti vandeniui, elektrolitams ir chemikalams, sudarytas iš kelių negyvų ląstelių sluoksnių
3. Grūdėtasis sluoksnis sudarytas iš 2-4 grūdėtų senstančių ląstelių sluoksnių, vandeniui atsparus odos barjeras
4. Dygliuotasis sluoksnis – bazinės ląstelės juda aukštyn, pernešdamos maistines medžiagas
5. Pamatinis sluoksnis – pradinės epidermio ląstelės

Keratino
zona 14 d.

Augimo
zona 14d.

Melaninas

Vidutinis odos storis: 0,07–2 mm.
Odos atsinaujinimo ciklas 28 dienos.


Derma lemia senėjimą

Vidutinis dermos sluoksnio storis: 1,3–4 mm

Speninis sluoksnis: turi daugybę nervų ir mikrokraujagyslių, jautrių lytėjimui.

Tinklinis sluoksnis: daugiausia sudarytas iš kolageno skaidulų, elastinių skaidulų ir tinklinių skaidulų.

Šiuos tris pluoštus išskiria fibroblastai.

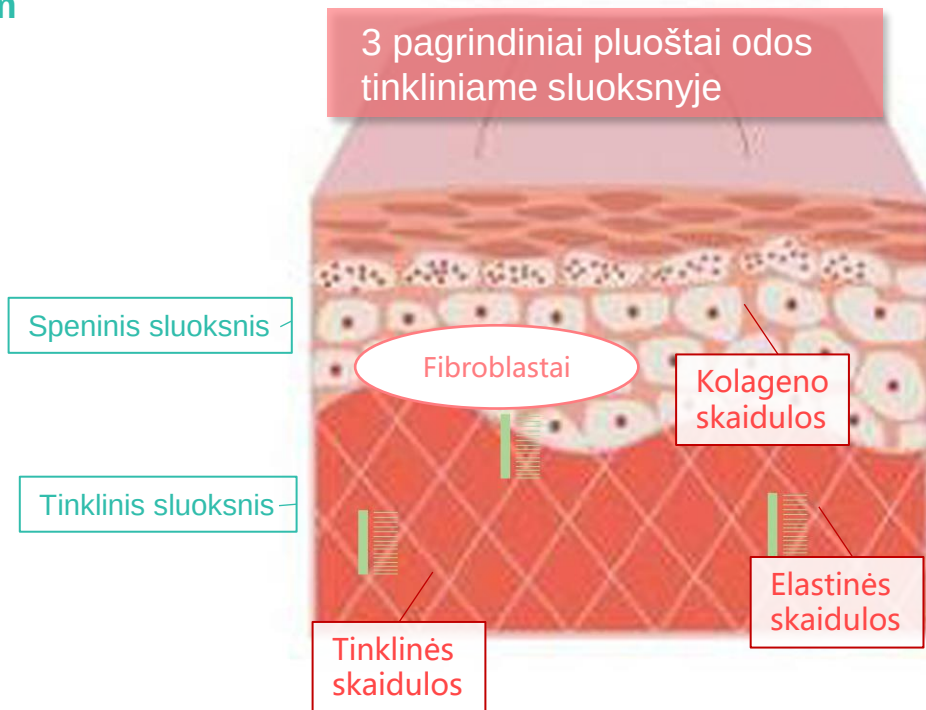

Daugelis odos priežiūros priemonių nesunkiai išlieka epidermyje

Yra 3 būdai, kaip cheminės sudedamosios dalys patenka į odą

1


Keratinocitų proliferacija

2

Interaktyvus keratinocitų įsiskverbimas

3

Odos ir prakaito liaukos (nedidelis kiekis)

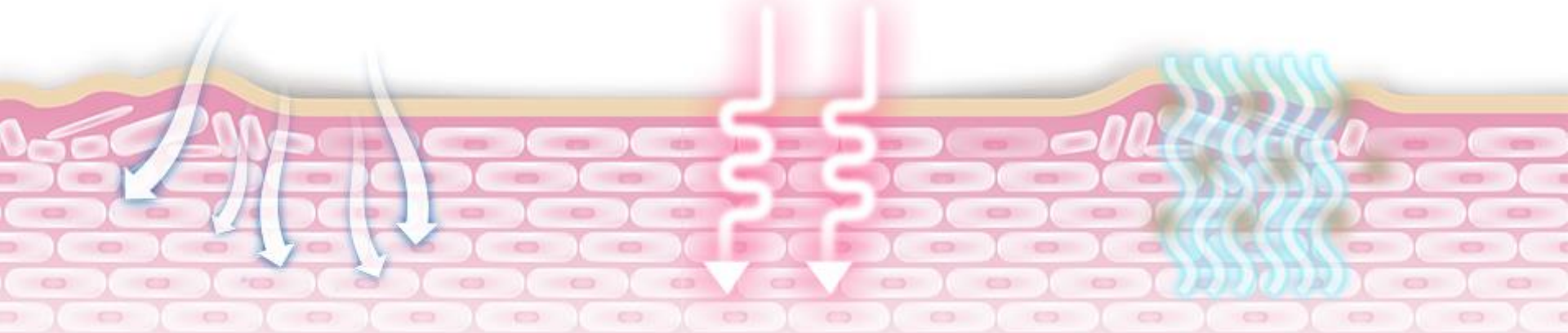

ÇILVARIS

歆悦·时




3 dalis

Revoliucinė technologija odos
priežiūros pramonėje

Radijo dažnio (RF) technologijos taikymas padeda stiprinti odos stangrumą, mažinti raukšles ir atjauninti odą

Mokslinės studijos

JAV maisto ir vaistų tarnyba (FDA) 2002 m. patvirtino radijo dažnio bangų technologiją ir ji buvo pradėta naudoti grožio srityje. Ši vis populiarėjanti technologija padeda mažinti raukšles, atsipalaiduoja odą, lėtina odos senėjimą, stangrina giliuosius odos sluoksnius.




Radio dažnio technologija

Kas yra radijo dažnis?

Radijo dažnis (RF), taip pat žinomas kaip radijo dažnio mikrosrovė, yra trumpa elektromagnetinės formos banga su aukšto dažnio kintamos srovės pokyčiu.

Radijo dažnio terminis efektas

Radijo dažnio skleidžiamos bangos, patenka į poodinius audinius ir judėdamos sukuria natūralų poodinio audinio pasipriešinimą, sukeliantį giliam odos sluoksnyje esančių epitelio ląstelių šildymo efektą.

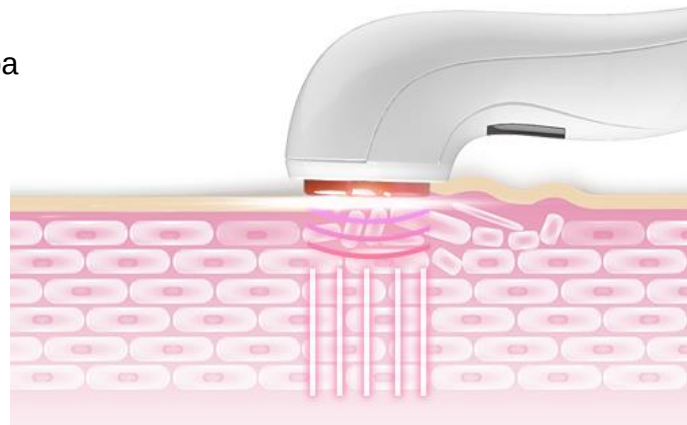

Terminis efektas turi dvigubą poveikį – skatina odos ir kolageno regeneraciją

Dermoje išsidėsčiusios kolageno skaidulos staigiai susitraukia, esant +55-65 ° C temperatūrai. Kolageno skaidulos susitraukia taip, kad atsilaivina odos raukšlės ir kolagenas iškart užsandinamas, o dermoje stimuliuojama daugiau naujo kolageno. Vyksta skaidulų regeneracija, kuri pakelia odą, t. y. atlieka vadinamąjį „liftingą“.

Raumenų elektrostimuliacijos taikymas V formos veido kontūrams formuoti

Mikrosrovė, dar vadinama raumenų elektrostimuliacija, gali švelniai įsiskverbti į odos audinį, pasiekti raumenų pagrindą ir efektyviai juos stimuliuoti, priverstinai atlikti susitraukimo veiksmus, kad padidintų raumenų aktyvumą ir funkcijas.



1 V formos veido
Kontūrų formavimas



2 Edemos mažinimas




3 Pakėlimas
(„liftingas“)


Ultragarsinės kavitacijos taikymas grožio priemonėje

Grožio priemonės ultragarsinis dažnis dažniausiai yra 1000–1200 KHz arba didesnis.


1. **Mechaninė vibracija:** sukuria subtilų masažo poveikį ląstelės membranoje ir sukelia citoplazmos judėjimą.
2. **Šilumos efektas:** prietaiso galvutei liečiantis su oda, skatinamas kraujagyslių plėtimasis odoje, gerinama medžiagų apykaita.

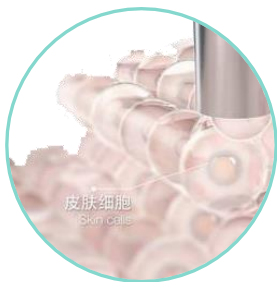


- 1 Skatina ląstelių metabolizmą

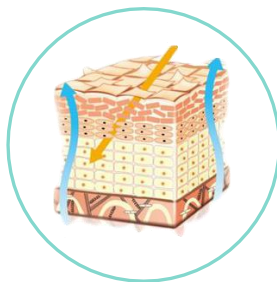

- 2 Gerina ląstelių gyvybingumą

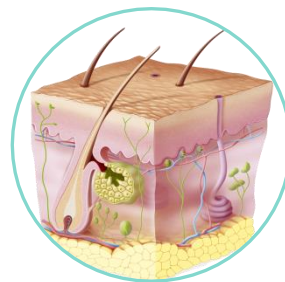

- 3 Gerina ląstelių membranos pralaidumą

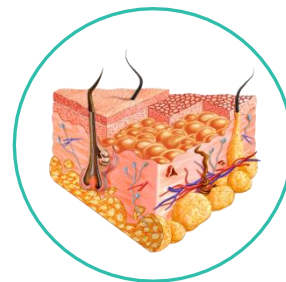

- 4 Gerina kraujo ir limfos cirkuliaciją

LED nano šviesa

Siauro spektro LED šviesos šaltinis neišskiria daug šilumos ir nekaitina odos. Jis paverčia šviesos energiją į ląstelių energiją, pagreitina ląstelių ciklą, regeneruoja odą ir sustiprina ląstelių veiklą.


635nm raudona šviesa (RED)

Ji vadinama biologiškai aktyvia šviesa. Raudona šviesa gali padidinti ląstelių aktyvumą, skatinti medžiagų apykaitą, pagerinti odos spalvą, sumažinti chlorozės požymius.



470nm mėlyna šviesa (BLUE)

Gali pašalinti aknės požymius ir pagerinti porų išvaizdą.

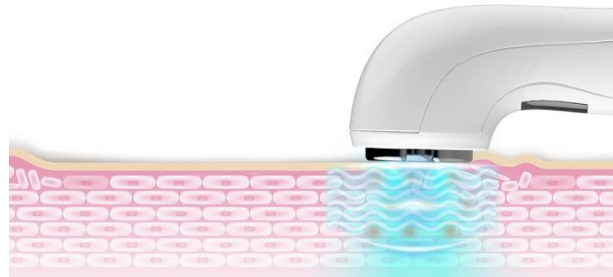

ÇILVARIS

歆悦·时

4 dalis


Išmani odos priežiūra =
Odos maitinimas + Grožio
prietaisas

5 min V formos veido
kontūrų formavimas

- Mažina raukšles
- Formuoja V-
formos veido
kontūrus
- Gražus smakras
- Trijų matmenų obuolio formos
skruostikauliai

CILVARIS
歆悦·时



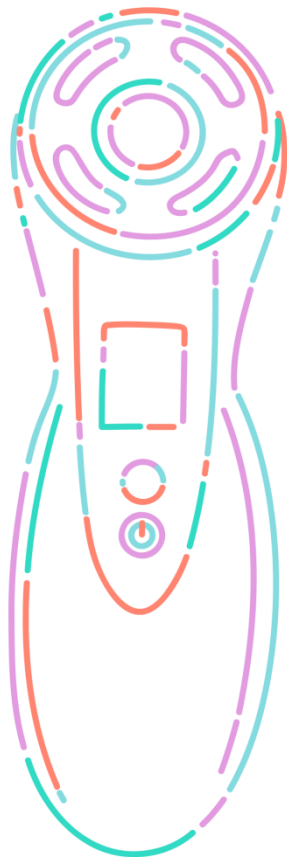

4 Odos priežiūros technologijų derinys

- „Liftingas“
- Patempimas
- Atjauninimas
- V formos veido kontūrų formavimas

ÇILVARIS

欢悦·时

+

+ 4 pagrindinės technologijos ○ Aktyvina kolageną, puoselėja odą

RF

Mažina raukšles ir
pakelia skruostų
raumenis

Apsauga nuo
senėjimo

EMS

Pakelia ir patempia
odą, formuoja V
formos veido kontūrus

Formavimas

CV

Užtvirtina gilų
drėkinimą

Drėkinimas

**LED red/blue
light**

Šviesina odos spalvą
ir mažina poras

Drėkinimas



• RF + nano raudona šviesa •

- Radio dažnio bangos 1.8MHz padeda apsaugoti nuo senėjimo ir raukšlių
- LED nano raudona šviesa atgaivina odą, skatina fibroblastus gaminti kolageną



• Rekomenduojama derinti su produktais •

Rekomenduojama naudoti lengvos konsistencijos kosmetikos produktais.



Esencija



Emulsija



Lengvas
kremas



Gelinis kremas



• EMS + nano mėlyna šviesa •

• EMS

„Liftingas“ ir patempimas, V formos veido kontūrai

• LED nano mėlyna šviesa
atgaivina odą,
mažina spuogus bei dėmes



• Rekomenduojama derinti su produktais •

Rekomenduojama naudoti su lengvos konsistencijos, gerai įsigeriančiais kosmetikos produktais.



Emulsija



Lengvas
kremas



Gelinis
kremas



Kaukė



• Ultragarsinė CV kavitacija + nano raudona šviesa •

• Ultragarsinė CV kavitacija - 5 milijonų vibracijų per sekundę

Maistinių medžiagų pernešimas ir pasisavinimas. Maistinių medžiagų mikro dalelės prasiskverbia giliai į odą ir veiksmingai ją drėkina.

• LED nano raudona šviesa atjaunina ir pašviesina odą

• Rekomenduojama derinti su




Emulsija



Lengvas
kremas



Gelinis
kremas

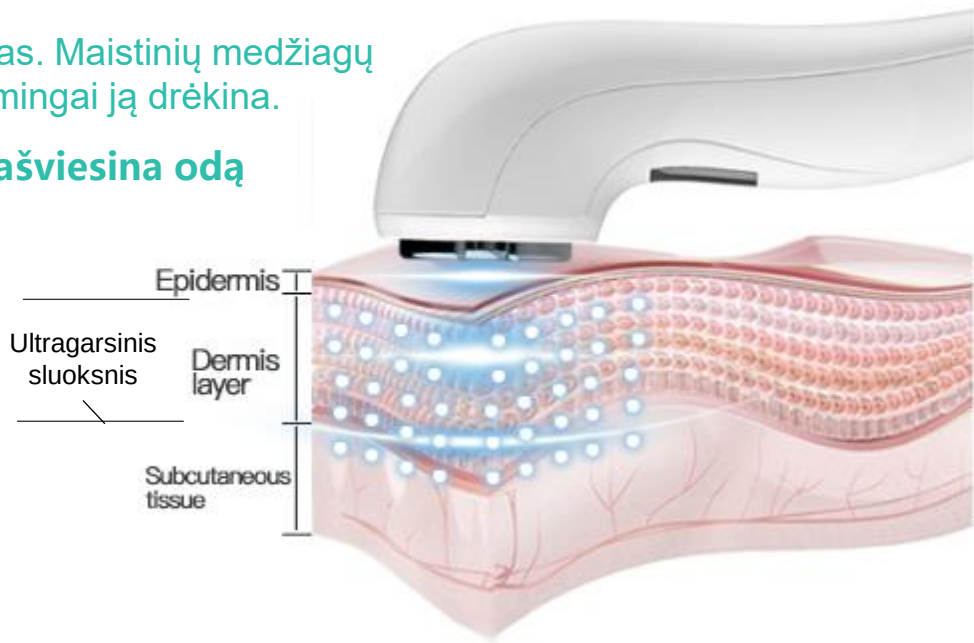

ÇILVARIS

歆悦·时



• IPX6 •


IPX6: Atsparus vandeniui

Į prietaiso vidų nepatenka nei vienas vandens lašas.

- Belaidis įkrovimas •

Belaidis indukcinis įkrovimas

Įkrovimas vieno mygtuko paspaudimu
Pasikrauna patogiai ir greitai

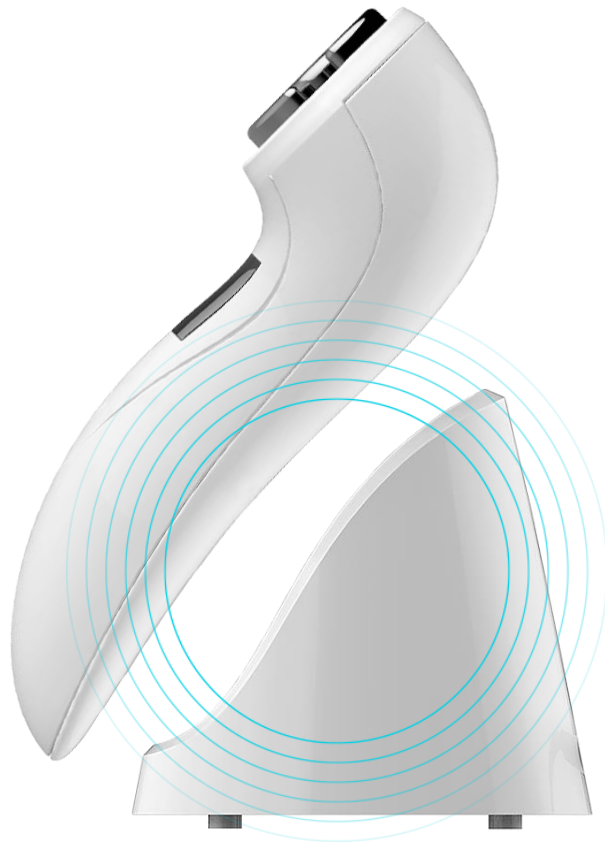



Režimai



- ① patvirtinkite režimą
- ② pasirinkite lygį

- ① Spauskite 2 s kad įjungtumėte
- ② Spauskite 2 s kad išjungtumėte
- ③ Režimų perjungimo funkcija

(Pasirinkite norimą lygį)

· RF režimas: 5 intensyvumo lygiai (RF+LED nano raudona šviesa)

R F ▶	R F ▶	R F ▶	R F ▶	R F ▶	R F ▶
OFF	1	2	3	4	5

· EMS režimas: 5 lygiai (EMS+LED nano mėlyna šviesa)

EMS ▶	EMS ▶	EMS ▶	EMS ▶	EMS ▶	EMS ▶
OFF	1	2	3	4	5

· CV režimas: CV ON/OFF

· **AUTO režimas:** (kombinuotas režimas = RF 3-ias lygis + CV ultragarsinė kavitacija) ON/OFF

1 žingsnis

Valymas

Nuvalykite makiažą įprasta valomąja priemone arba

pasirinkite CV režimą veidui valyti.



Tvirtinimo
žiedas

Vatos
diskelis


Prietaiso
galvutė

Baigta



CILVARIS

欣悦·时

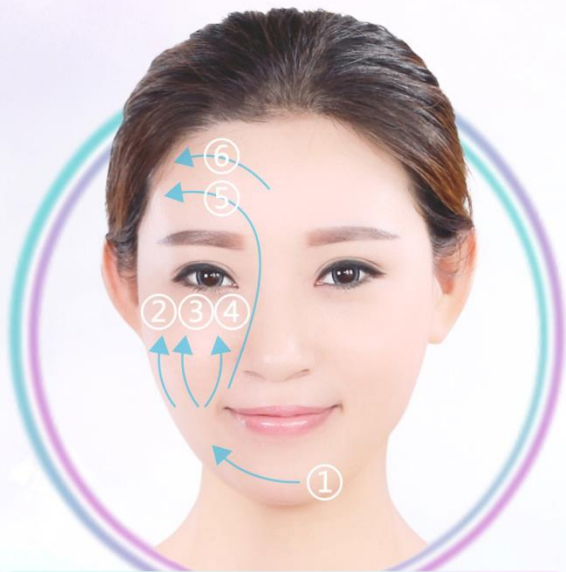

**CV ultragarsinis
kavitacijos režimas**

Pavyzdys

CV · ON

Dvigubas valymas



★ Naudokite M&Y HYDRA prausiklį ir žiedlapių losjoną

■ Masažuokite švelniais sukamaisiais judesiais



2 žingsnis

Kosmetikos gaminių naudojimas

Pagal prietaiso režimą pasirinkite
tinkamą odos priežiūros gaminį.



CILVARIS

欲悦·时



Pavyzdys



RF radijo dažnio
režimas

R F ▶ ■■■■

Apsauga nuo odos senėjimo ir raukšlių
Mažina raukšles, mimikos linijas



arba


★ Naudokite M&Y HYDRA veido esenciją arba visapusiško poveikio drėkinamąjį kremą

★ Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.

■ Masažuokite švelniais judesiais

ÇILVARIS

欲悦·时

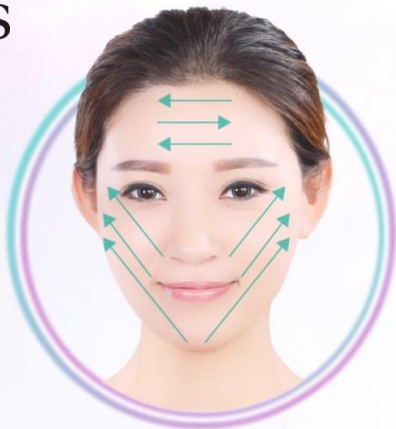

Pavyzdys



EMS raumenų
elektrostimuliacijos
režimas

EMS ▶ ■■■■

Veido odos pakėlimas („liftingas“), patempimas, V formos veido kontūrų formavimas, mimikos linijų mažinimas



arba



- ★ Naudokite M&Y HYDRA apsauginę emulsiją arba visapusiško poveikio drėkinamąjį kremą
- ★ Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.

■ Masažuokite nestipriai spausdami prie veido

ÇILVARIS

歆悦·时



Pavyzdys



**CV ultragarsinės
kavitacijos režimas**

C V ▶ ON

Maistinių medžiagų pernešimas ir pasisavinimas. Maistinių medžiagų mikro dalelės prasiskverbia giliai į odą ir veiksmingai ją drėkina.



arba



- ★ Naudokite M&Y HYDRA apsauginę emulsiją arba visapusiško poveikio drėkinamąjį kremą
- ★ Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.

Masažuokite nestipriai spausdami prie veido

Kiti prietaiso naudojimo pavyzdžiai

Rekomenduojama naudoti su
drėkinamaisiais kosmetikos gaminiais.
Nenaudokite prietaiso ant sausos odos.



> Smulkių raukšlių mažinimas

· RF-Radijo dažnio režimas ·

· ① Sumažina kaktos raukšles

· Masažuokite prietaisu nuo kaktos vidurio į kairę ir į dešinę.



· ② Sustiprina paakių raumenis, mažina paakių paburkimą ir raukšles.

· Masažuokite prietaisu nuo vidinio akių kampo išorinio akių kampo link.



· ③ Skatina kolageno gamybą/ mažina raukšles

Masažuokite veidą prietaisu sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.



· ④ Mažina galias nasolabialines raukšles, einančias nuo nosies kampo iki lūpų kampo




> V formos veido kontūrų formavimas

· EMS (raumenų elektrostimuliacijos) režimas·

· ① Veido odos pakėlimas,
V formos veido kontūrų
formavimas

· Masažuokite veidą prietaisu nuo
burnos apačios į viršų.

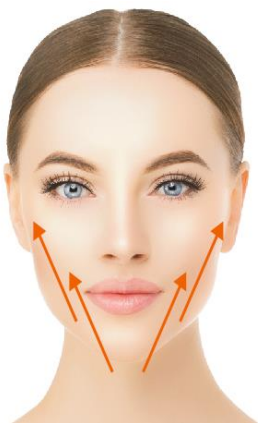

· ② Šviesina aknės žymes
ir tamsias dėmes

· Aknės žymes ir tamsias dėmes
patepkite gydomąja priemone ir
švelniai masažuokite



> Gilus priemonių pasisavinimas

· CV (ultragarsinės kavitacijos) režimas ·

· ① Drėkina ir skatina geresnį maistinių medžiagų įsisavinimą

· Masažuokite veidą prietaisu sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.



· ② Sumažina galias nasolabialines raukšles ir pakelia suglebusią odą

· Masažuokite veidą prietaisu nuo nosies kampo iki lūpų kampo



> Patogiausias – automatinis režimas

· Automatinis (kombinuotas) režimas ·

Patepę veidą drėkinamąja kosmetikos priemone arba kauke pasirinkite automatinį režimą.
AUTO:ON

Šio režimo programa:

Iš pradžių: RF režimo 3-iasis lygis + nano raudona šviesa + ultragarsinis CV režimas 7,5 minutes

Vėliau: pereina į EMS režimo 2-ą lygį + nano mėlyna šviesa 7,5 minutes



Prietaiso savybės



5 intensyvumo lygiai



Išmanus laikmatis



Atsparus vandeniui



Belaidis įkrovimas



Automatinis išsijungimas po 15 minučių



Nešiojamas



Komplekte:

Prietaisas, maišelis, įkrovimo stovas, tvirtinimo žiedas, instrukcija lietuvių kalba

CILVARIS

歆悦·时

CILVARIS

• Tavo jaunystės paslaptis•

